




Spectro UV-2650 UV-VIS Espectrofotómetro Barrido

Modelo UV-2650

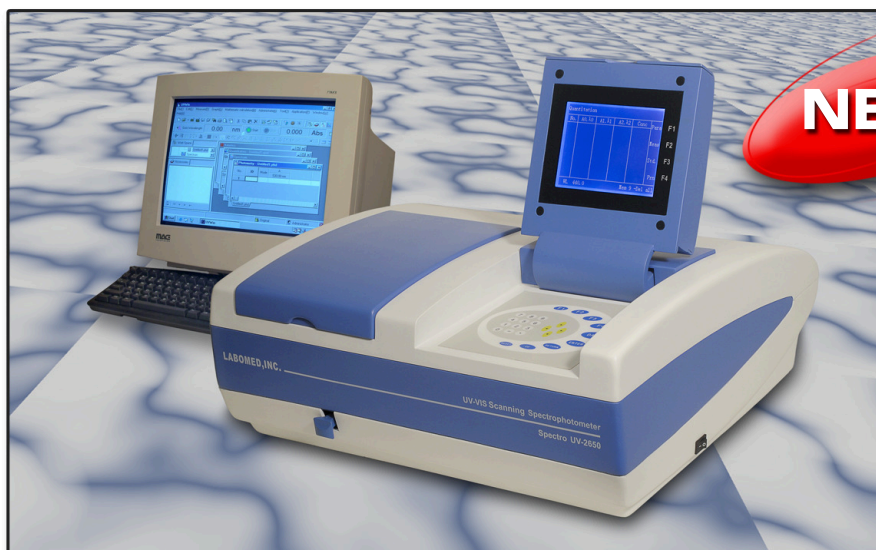

Spectro UV-2650 es un nuevo solo rayo scanning Espectrofotómetro UV-VIS; con su perfecta integración con cualquier PC, que permite gestionar datos excepcionalmente fácil. Este espectrofotómetro ofrece mayor facilidad de uso, precisión y exactitud resultante en el tiempo y ahorro de costes, así como sin precedentes la confianza en resultados de la prueba. Modelo UV-2650 obras en el ultravioleta y visible gama de 190-1100 nm y tiene un ancho de banda de 2 nm.

Modelo UV-2650 espectrofotómetro ofrece alto rendimiento y fiabilidad, que puede ser utilizado en diversas aplicaciones. Spectrophotometer Model UV-2650 Puede ser utilizado ampliamente para análisis cualitativo y cuantitativo en sectores tales como los análisis clínicos, los laboratorios médicos, ADN/ARN ensayos, petroquímica laboratorios, química y bioquímica laboratorios, educación labs, laboratorios de investigación, laboratorios de análisis, así como en control de calidad departamentos, control ambiental, gestión del agua, procesamiento de alimentos y agricultura, particulary porque Espectrómetro UV-2650 tiene la posibilidad de usar 100mm células con su celda titular.

Spectro UV-2650 también es capaz de realizar prueba cinética mediante el uso de un facultativo Peltier Temperatura constante Sistema. Modelo UV-2650 tiene una excelente base estabilidad y de alta resolución.

Fituras

- Gran longitud de onda, satisfaciendo requisito de diversos campos.
- Ancho de banda espectral 2 nm.
- Manual 4-cell titular acomoda largo camino longitud células hasta 100mm.
- Optimizado óptica y electrónica diseño, fuente de luz y detectores del famoso fabricante garantizar un alto rendimiento y fiabilidad.
- Salida de datos pueden ser obtenidos vía un puerto de impresora y una interfaz RS-232 (RS485 y puerto USB opcional).
- Parámetros y datos pueden almacenarse para usuario.
- PC controlada medición puede lograrse con más precisión y flexible.

Accesorios

4 Square optical células 10mm.
2 Square cuarzo células
10 mm con tapa cubierta manual de instrucciones
Espectrómetro Software Win98/2000/XP Compatible

Software Manual de Operación
Cable PC
Opcional: Peltier Prueba Cinética Sistema
Opcional: Cierre fluir a través Sistema